


# DENSILAMETER® II

Přesně a spolehlivě  
ke správné identifikaci



Unikátní způsob stanovení  
hustoty mikrobiálního inokula



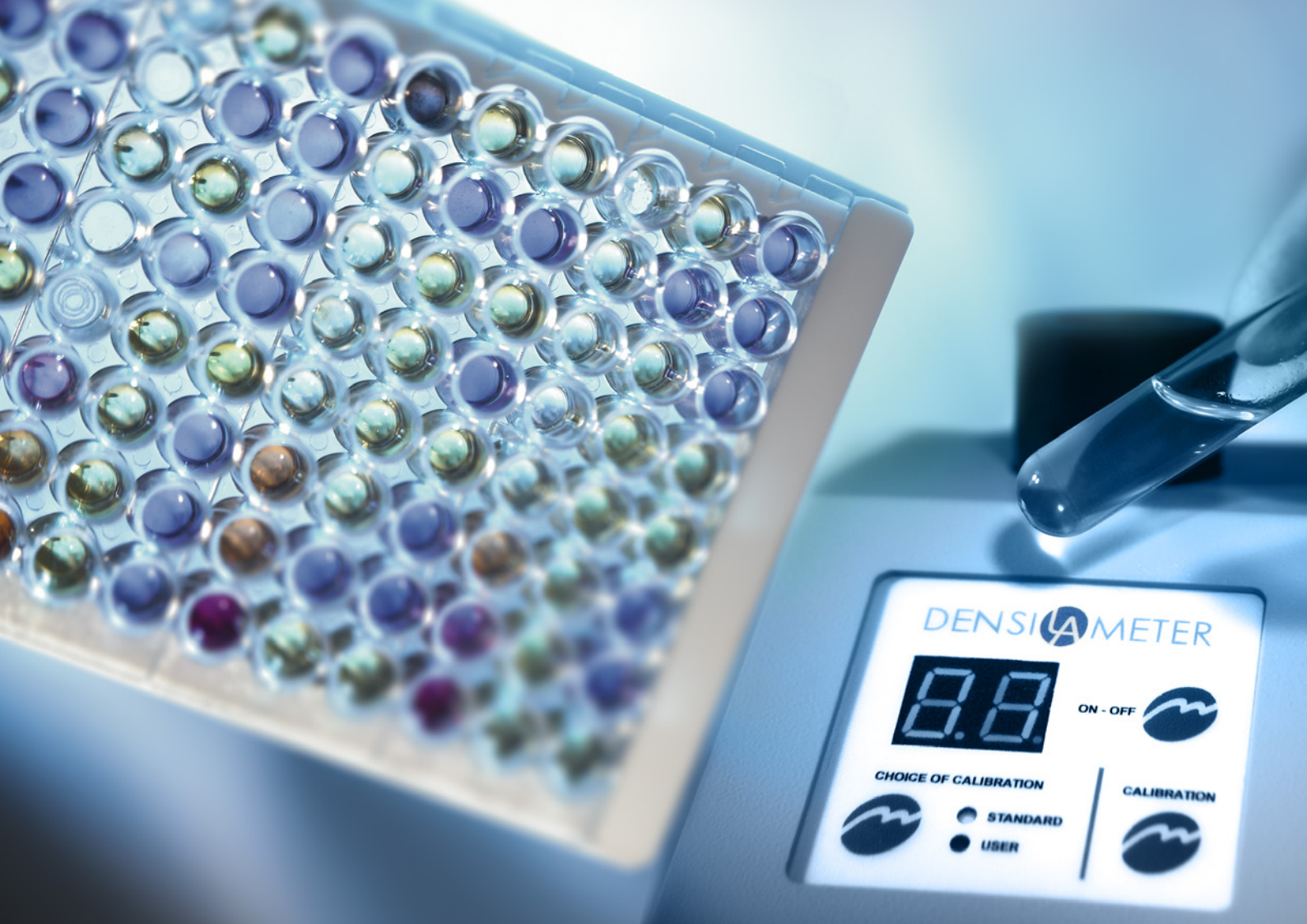

# DENSILAMETER® II

## Objektivní stanovení hustoty mikrobiální suspenze

- přesnost měření – přístroj v průběhu měření se zkuševkou otáčí a provádí 6 měření, tím eliminuje náhodné chyby. Výsledek je průměrem naměřených hodnot
- dvě výrobní kalibrace – kalibrace STANDARD je výrobcem nastavena pro měření v polystyrénových zkuševkách firmy Erba Lachema
- kalibrace USER je výrobcem nastavena na měření ve skleněných zkuševkách NAF, ve kterých jsou dodávána suspenzní média
- možnost nastavení vlastní kalibrace a používání vlastních zkuševek
- měření zákalu v rozmezí 0,3 – 15 McF
- minimální objem suspenze je 2 ml
- odnímatelný nástavec pro různé výšky zkuševek



**Erba Lachema s.r.o.**  
 Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Česká republika  
 Tel.: +420 517 077 111  
 E-mail: [diagnostics@erbamannheim.com](mailto:diagnostics@erbamannheim.com)  
[www.eralachema.com](http://www.eralachema.com)



Contact info / map