



CANDIDA-Screen

Základní identifikace kvasinek

- komfortní bezčinnidlová souprava
- identifikace 13 klinicky nejvýznamnějších druhů kvasinek
- 8 barevných reakcí zahrnující fermentační testy, test prolin a ureázový test
- snadný vizuální odečet výsledků
- bez suspenzního média
- inkubace 24 hod. při 25 - 30°C

Souprava obsahuje:

- 36 identifikací
- návod k použití s diferenciací tabulkou
- 3 PE sáčky pro inkubaci
- 36 formulářů pro záznam výsledků
- sáček na uložení nespotřebované destičky
- víčko pro inkubaci
- barevnou škálu a kódovou knihu na CD



CANDIDA-Screen




Barevná škála / Farebná stupnica / Colour scale / Цветная шкала / Porównawcza skala barw / Színskála / Farbskala / Escala de colores

	H	G	F	E	D	C	B	A
	URE	SUC	MLT	LAC	GAL	TRE	CEL	PRO
(+)								
(-)								

MIKROTEST®

BLUE POINT OF QUALITY

CANDIDA-Screen

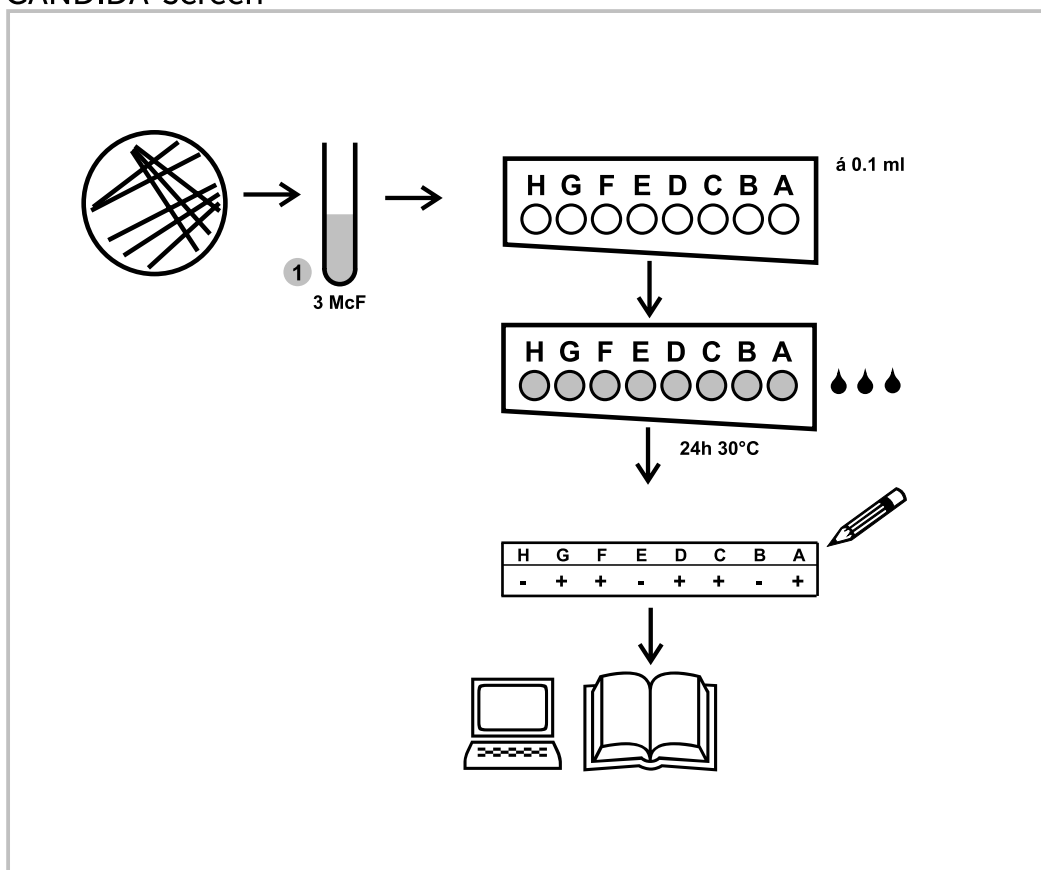

1 = Parafinový olej - Paraffin oil - Пар.масло - Olej parafinowy - Paraffinolaj - Paraffinöl - Aceite de parafina
 = Fyzilogický roztok - Saline - Физраствор - Roztwór soli fizjologicznej - Fiziológias sóoldatban - Physiologische Lösung - Solucion fisiologica salina