


Zestaw bezodczynnikowy

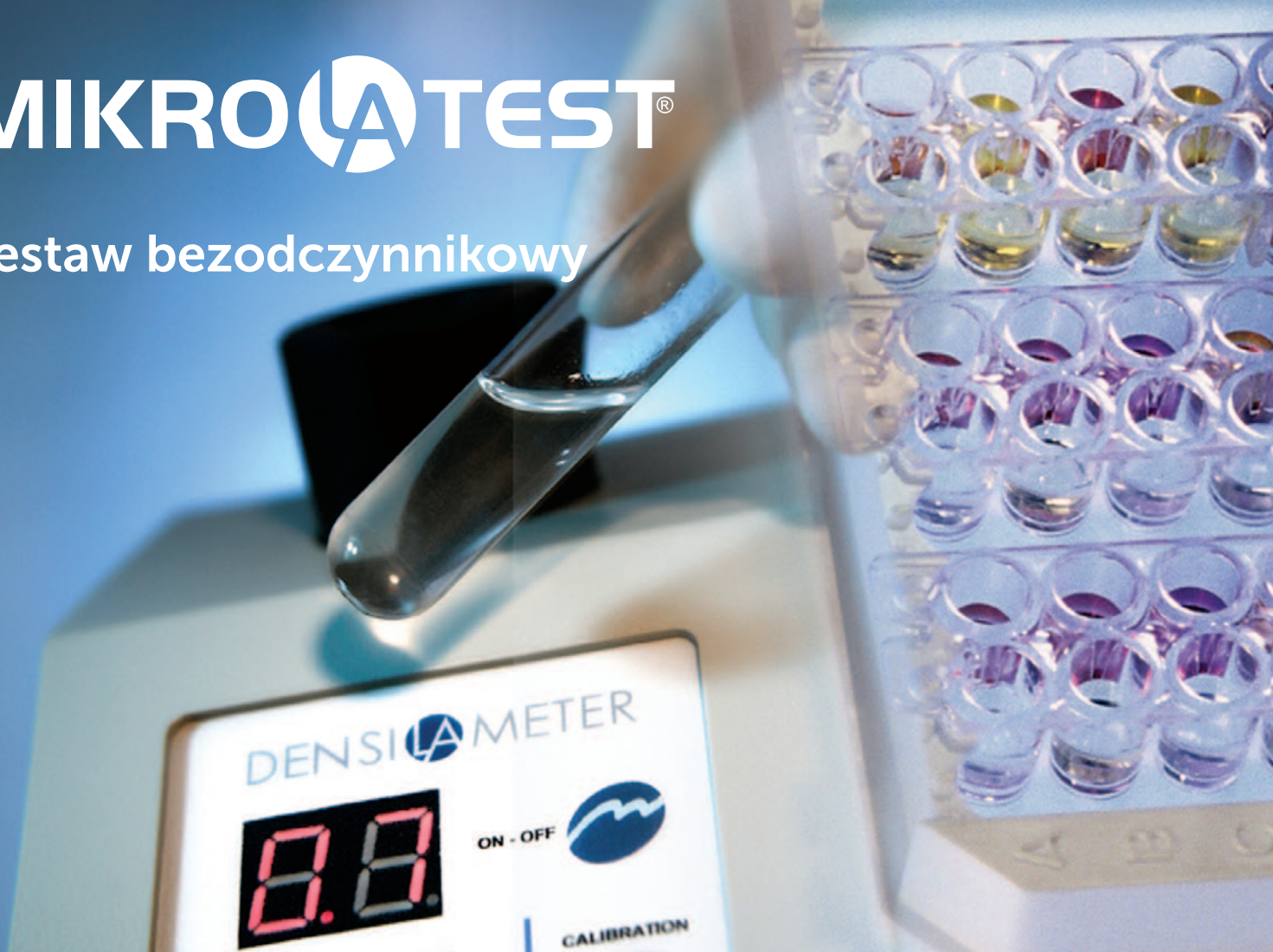

CANDIDA-Screen

Podstawowa identyfikacja grzybów drożdżopodobnych

- wygodny zestaw bezodczynnikowy
- identyfikacja 13 klinicznie najważniejszych gatunków grzybów drożdżopodobnych
- 8 reakcji barwnych obejmujących testy fermentacyjne, test prolin i test ureazowy
- łatwy wizualny odczyt wyników
- bez nośnika zawiesiny
- inkubacja przez 24 g. w temp. 25-30 °C

Zestaw zawiera:

- paski do 36 identyfikacji
- instrukcję obsługi z tabelą różnicującą
- 3 PE torebki do inkubacji
- 36 formularzy do zapisywania wyników
- torebkę do przechowywania niezużytej płytki
- pokrywę do inkubacji
- porównawczą skalę barw i drukowaną książkę kodów

Erba Lachema s.r.o., Karásek 1d, 621 00 Brno
Tel.: +420 517 077 111, fax: +420 517 077 077
E-mail: diagnostics@erbalachema.com

Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Szamocińska 21, 61-417 Poznań
Tel. kom. +48 510 251 115, fax: +48 61 830 76 53
E-mail: tvrdon@erbalachema.com, www.erbalachema.com



CANDIDA-Screen




Barevná škála / Farebná stupnica / Colour scale / Цветная шкала / Porównawcza skala barw / Színskála / Farbskala / Escala de colores

	H	G	F	E	D	C	B	A
	URE	SUC	MLT	LAC	GAL	TRE	CEL	PRO
(+)								
(-)								

MIKROTEST®

BLUE POINT OF QUALITY

CANDIDA-Screen

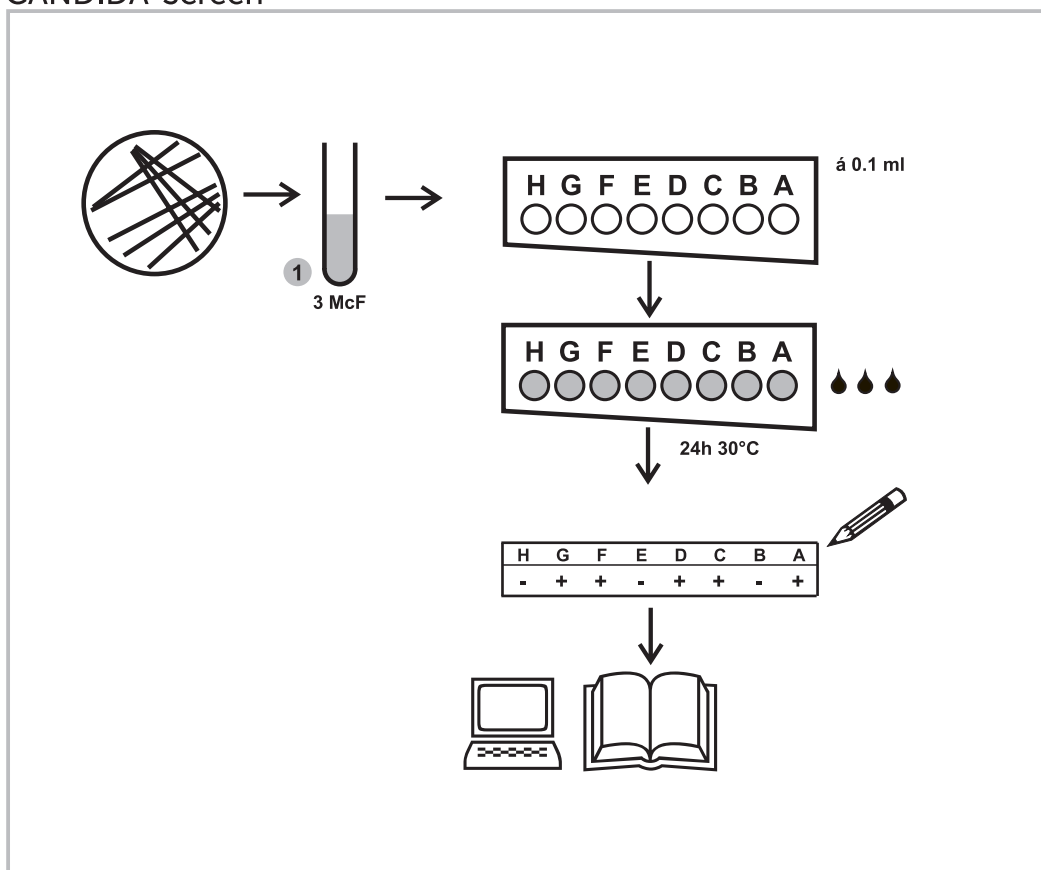

1 = Parafinový olej - Paraffin oil - Пар.масло - Olej parafinowy - Paraffinolaj - Paraffinöl - Aceite de parafina

1 = Fyziologický roztok - Saline - Физраствор - Roztwór soli fizjologicznej - Fiziológias sóoldatban - Physiologische Lösung - Solucion fisiologica salina